
Advanced Dental Designs, Inc.
22640 Goldencrest Drive, #106
Moreno Valley, CA 92553 • USA
USA & Canada: 800.232.2849
International: +001 951.579.4535
www.ad2usa.com

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - #123
2595 AM The Hague The Netherlands

Adjustable Platform Instrucciones


Items #AR500050 – AR500950, AR560150 – AR560950

1

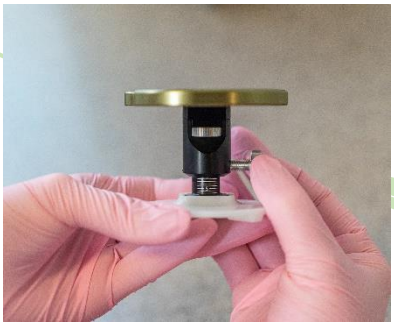


Desbloquee la plataforma con el tornillo de seguro, usando el tornillo dactilar gire para poner la plataforma en cero y entonces asegure en su lugar con el tornillo de seguro.

2

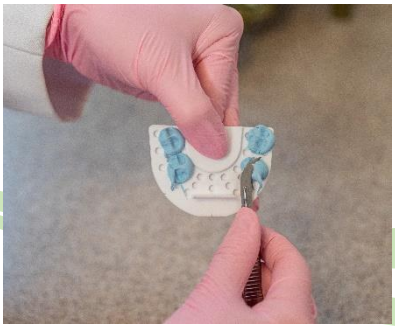


Corte el material de registro tanto como sea necesario para que las cúspides sean visible y no haya material que interfiera con el modelo maxilar sellando apropiamente los bordes.

3

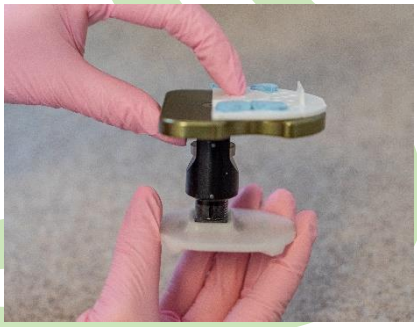

Coloque la bandeja de registro dentro de la plataforma en los huecos de la bandeja, asegurándose que la bandeja este plana en la plataforma.

4

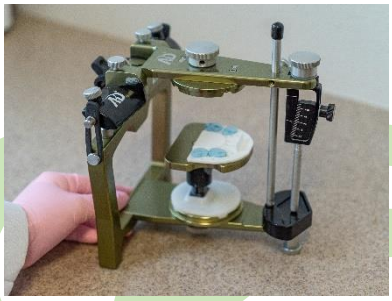

Coloque la plataforma en forma segura sobre la base magnética en la parte mandibular del articulador.

5



Asiente el modelo maxilar en la bandeja de registro en las contactos de las cúspides.

6



Instale la platina de montaje en la en arco maxillar, coloque el pin incisal en cero agregar yeso cuanto sea nesesario.

7



Cierre el maxillar con la parte mandibular r y deje que seque, aplique una lijera presión en la parte superior del marco. Para prevenir que se mueva mientras seca.

8



Abra el articulador, retire la bandeja de registro e instale la platina espaciadora en lugar de la bandeja de mordida.

9



Determine el trabajo necesario, (por ejemplo: agregue 2mm de distancia incisal). Desbloquee la tabla con el tornillo manual baje la tabla 2mm y asegure el lugar con el tornillo manual, encere la parte superior de la cera

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente